


Attends® Soft




Attends – systém s 10 stupni absorpce pro močovou inkontinenci

Attends Soft je sada malých anatomicky tvarovaných vložek určených pro lehkou až těžkou močovou inkontinenci.

Soft 0-3+

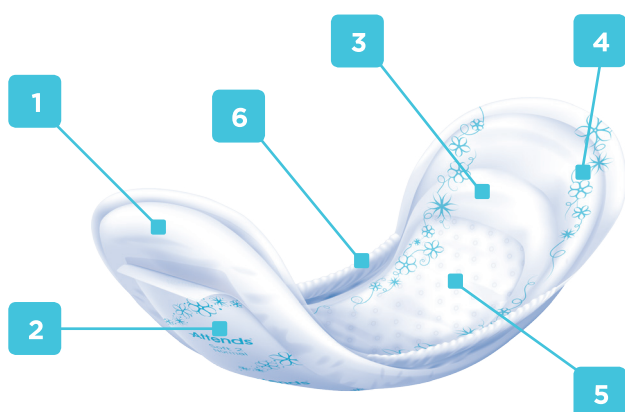

Soft 4-7

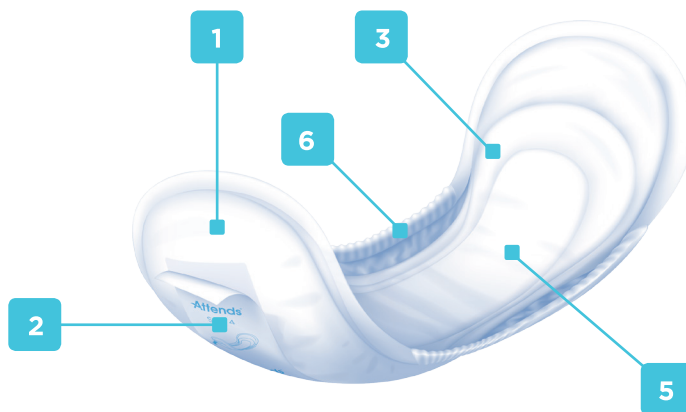

- 1** Bílá prodyšná zadní část jako ochrana proti znečištění a pro lepší pohodlí, diskrétnost a zdraví pokožky.
- 2** Fixační pásy umožňují nošení vložky s přiléhavým spodním prádlem pro diskrétnost a komfort.
- 3** Anatomicky tvarované jádro pro pohodlné nasazení.
- 4** Měkká potisknutá svrchní vrstva (Soft 0 - 3+) pro více komfortu a estetický vzhled.
- 5** Superabsorpční jádro se sběrnou vrstvou zlepšuje ochranu před protečením, udržuje pokožku suchou a chrání proti zápachu.
- 6** Bariéry z měkké elastické pěny (Soft 2 - 7) napomáhá vytvoření miskového tvaru pro lepší přiléhavost a ochranu proti úniku moči.



Attends Soft testoval a schválil proDERM, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum.

Pro více informací navštivte www.attends.cz

Attends Soft

	Počet kusů v balení Počet balení v kartonu	EAN 7332152 Balení / Karton	Délka (cm) Šířka v rozkroku (cm)	Spodní vrstva	Savost, jádro materiálu	Vrchní strana materiálu	Elastické	Fixační pásy	"Odour Protection" ochrana proti zápachu	Prodyšné	Technologie Quick-Dry
Attends Soft Ultra Mini 0	28 8	205068 205075	20.5 6.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Vzdušné jádro z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini 1	20 12	204542 205327	21.5 8	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Lehké jádro z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini Long 1	16 12	204566 204863	27.5 8	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Lehké jádro z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Normal 2	12 8	207239 207246	26.5 10.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Dvoujádrový systém z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	Elastická pěna	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra 3	10 8	207253 207260	32.5 12	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Dvoujádrový systém z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	Elastická pěna	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra Plus 3+	10 12	204665 205112	36.5 13	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Dvoujádrový systém z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	Elastická pěna	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Super 4	46 3	204740 207673	38.5 14.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Dvoujádrový systém z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	Elastická pěna	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 5	38 4	204764 204771	47.5 16.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Dvoujádrový systém z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	Elastická pěna	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 6	38 4	204788 204795	47.5 16.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Dvoujádrový systém z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	Elastická pěna	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 7	34 4	204801 204818	47.5 16.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Dvoujádrový systém z buničiny, superabsorbentů a syntetických vláken s vrstvou Quick-Dry	Netkaný	Elastická pěna	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Quick-Dry je přijímací vrstva umístěna přímo pod horní vrstvou, kde moč vstupuje do pomůcky. Ta rychle odvádí moč od pokožky směrem do pomůcky a zabraňuje moči proniknout zpět k povrchu. Může zvládnout několik výronů moči bez ovlivnění funkce pomůcky. Poskytuje mimořádný pocit sucha a ochrany pokožky pro uživatele.



Natural Odour Protection

Natural Odour Protection snižuje riziko nepříjemných pachů.



Aktivní zóna

Aktivní zóna je oblast ve středu střední části pomůcky, která umožňuje rychlé vstřebání, přesně tam kde je to skutečně zapotřebí. To poskytuje výjimečnou ochranu pro uživatele a suchou pokožku.



Super Soft Top Sheet

Měkká a šetrná horní vrstva.



Hodnota pH

Jádro s vlnitými vlákny, přijímací vrstva zaručují nízké pH, které je podobné jako pH kůže. To pomáhá chránit pokožku a udržet ji zdravou.



Prodyšnost

Prodyšný materiál umožňuje pokožce dýchat, což přispívá k udržení zdravé pokožky.



Jednotlivě balené

Tyto výrobky jsou jednotlivě balené, pro lepší hygienu a diskretnost.